


Innstillinger for etikettskrivar


Gå til kontrollpanel og finn «Enheter og skriverer».

Høgreklikk på etikettskrivaren (GX420t) og klikk på «Utskriftsinnstillinger».

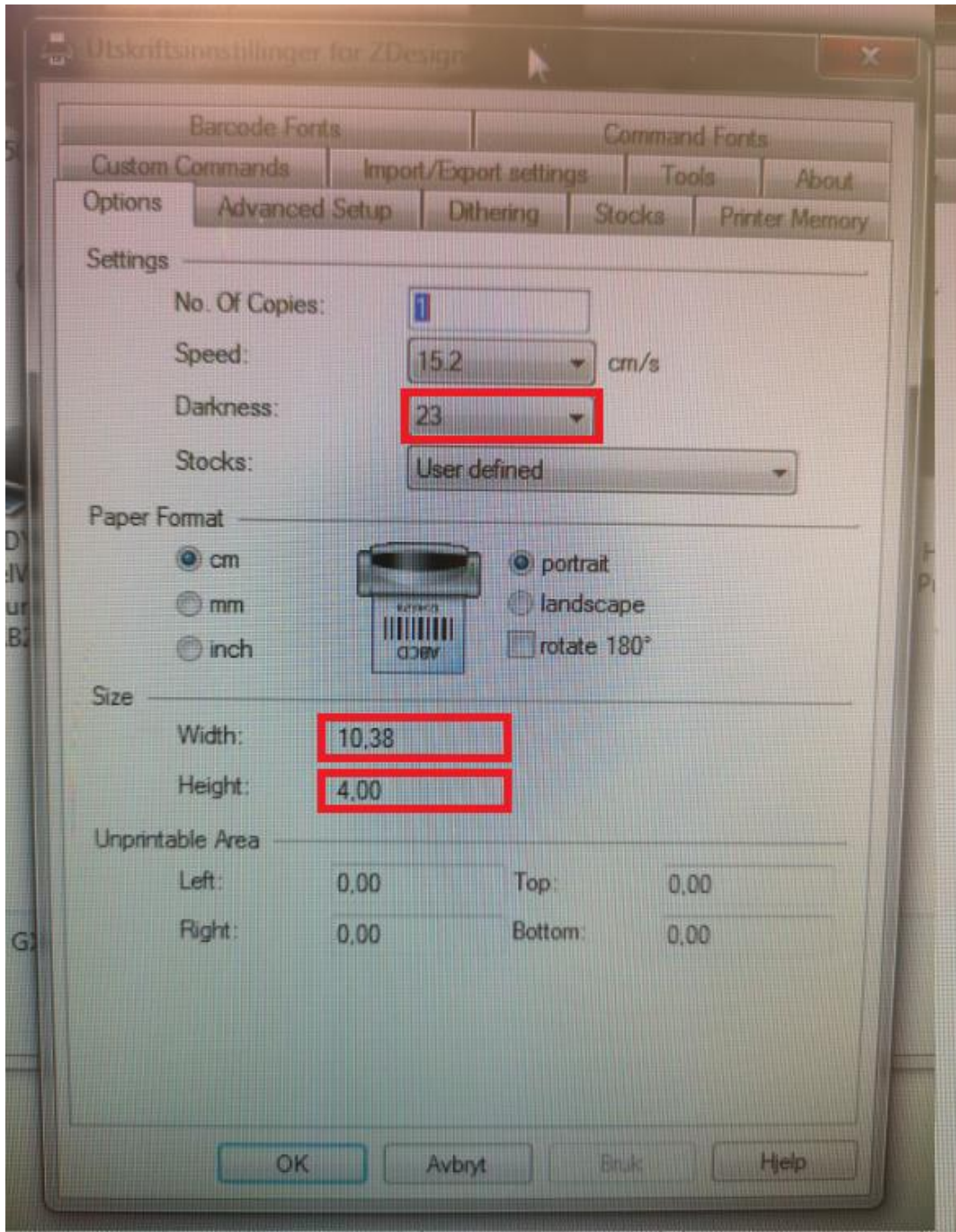


- Sett «Darkness» : 23
- Sett «Width» : 10,38
- Sett «Height» : 4,00

Klikk på fana «Advanced Setup»:

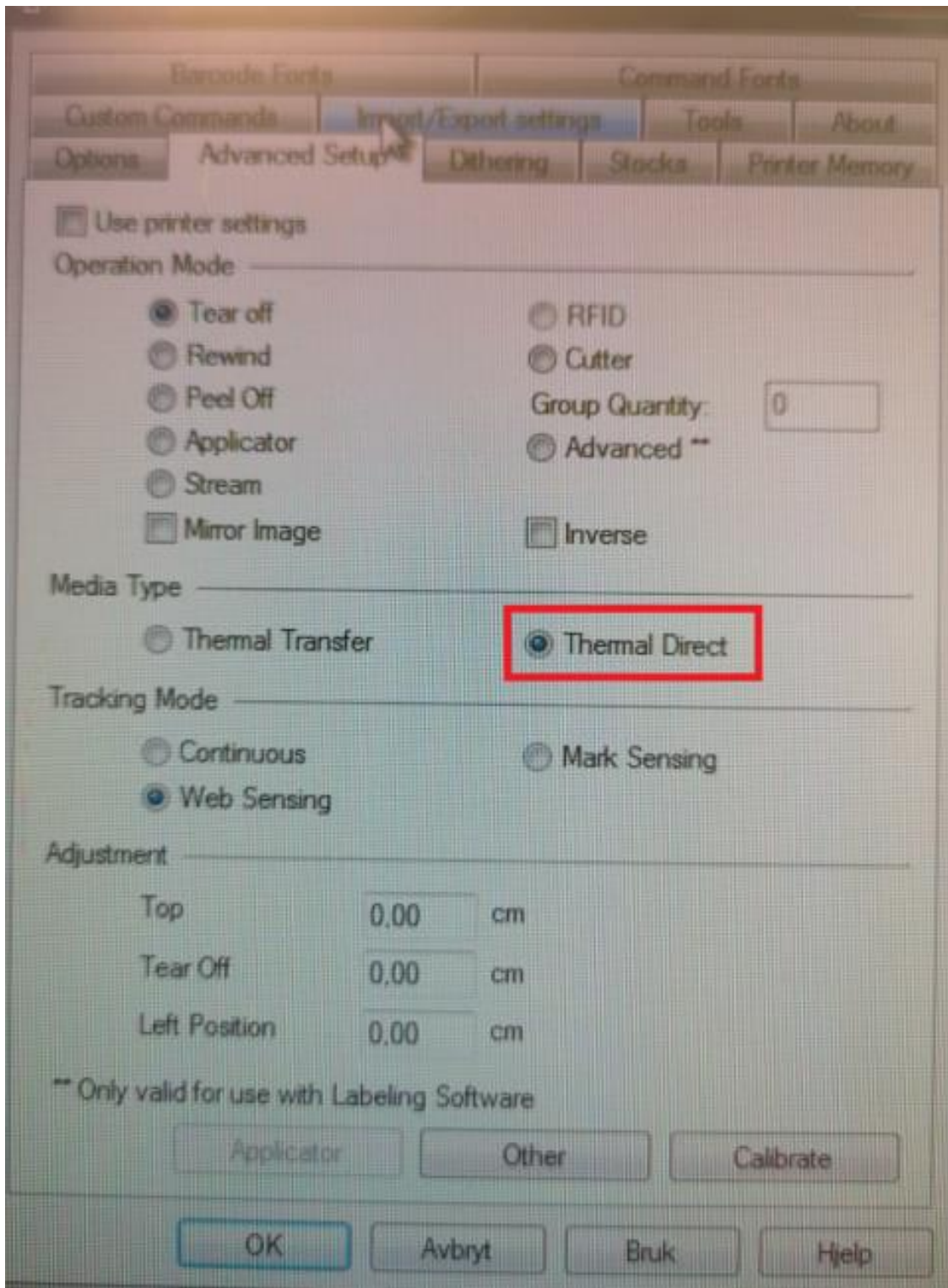

Under «Media Type» vel «Thermal Direct».

Val av etiketterskrivar i IHR:

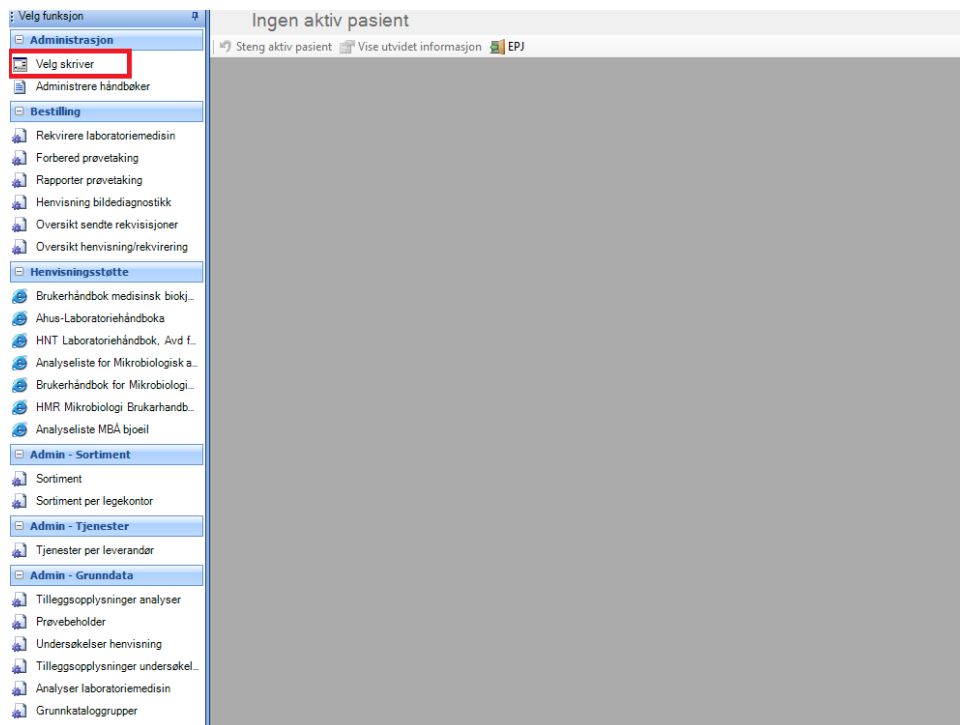


Klikk på «Velg skriver»

Utskrift	Beskrivelse	Skriver
Label	Standardetikett	PDFCreator
SendOrderOverview	Oversikt sendte bestillinger	PDFCreator
RequisitionOverviewPK	Klinisk/mikrobiologi ordination2	PDFCreator
RequisitionOverview	Oversikt henvisning/rekvirering	PDFCreator
ReportTestList	Rapporter prøvetakingsliste	PDFCreator
PrepareTestList	Forbered prøvetakingsliste	PDFCreator
LabPrescriptionReserv	Rekvisjon	PDFCreator
LabPrescription	Rekvisjon	PDFCreator
AnatomicReserv	Rekvisjon	PDFCreator
Anatomic	Rekvisjon	PDFCreator

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Velg skriver' (highlighted with a red box) and 'Velg standard'.

Vel linja med «Utskrift: Label» og «Beskrivelse: Standardetikett».

Trykk «**velg skriver**».

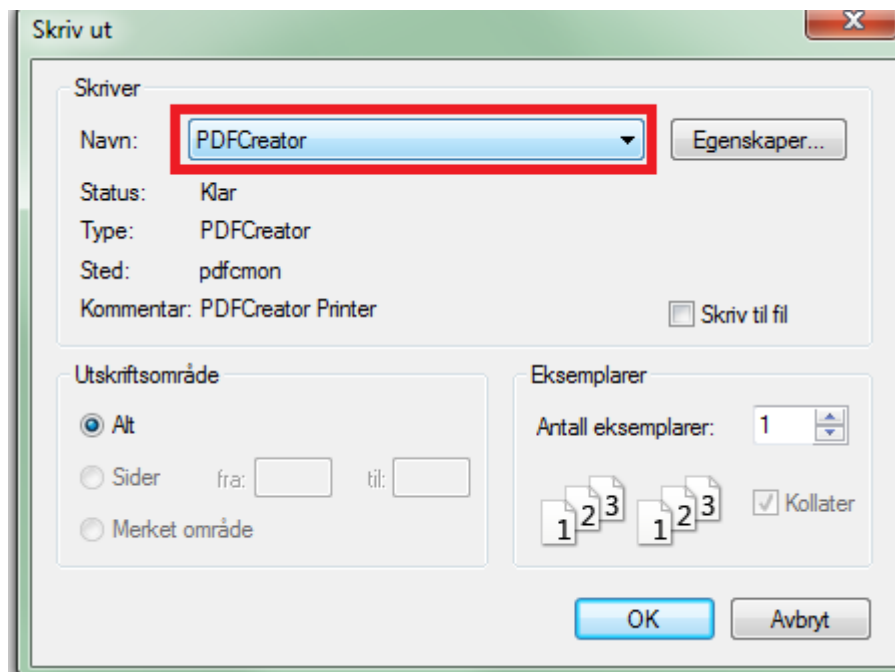

Vel etikettskrivaren (**GX420t**) og trykk OK.