




Instruksjon for prøvetaking til Kalprotektin i avføring

Les denne instruksjonen før du tar CALEX® Cap røret i bruk. Røret må ikke brukes hvis det har gått ut på dato. Les og følg instruksjonen nøye, evt. se video via QR kode hvis ønskelig. Det er viktig at alle punkt blir fulgt for at prøvesvaret skal bli riktig. NB! Prøverøret kan oppbevares fra 2 - 28 C° før prøvetaking.


1. Avføring bør ikke komme i kontakt med vann eller urin i toalettet. Lat urinen først. Bruk deretter f.eks. rikelig med toalettpapir i toalettskålen, en ren potte, en tom ren isboks el. til avføringen.

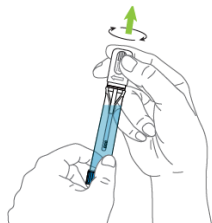

Hold røret med den **HVITE** toppen opp. Løsne prøvetakingspinnen fra røret ved å samtidig vri og dra den ut fra glasset.

Sett evt. røret i en kopp slik at det ikke velter mens du tar prøven.


2. Stikk og vri prøvepinnen på **3-5** forskjellige steder i avføringen. Påse at alle rillene på pinnen er fylt med avføring!

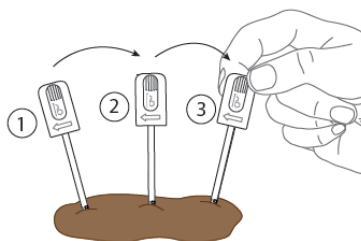

Merk: Overflødig avføring fjernes i trakten når prøvepinnen settes inn i CALEX® Cap igjen.

3. Sett deretter prøvepinnen tilbake i prøverøret som vist på illustrasjonen. **Trykk deretter HARDT ned på prøvepinnen slik at du hører to klikk!**

Påse at den hvite toppen ligger helt inntil prøveglasset, at den er låst fast og forseglet. Det skal ikke være noe mellomrom mellom den hvite prøvepinnen og glasset.

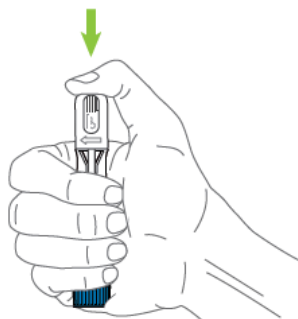

Når prøven er forseglet, vend glasset godt, minst 10 ganger, slik at avføringen slipper fra rillene på prøvepinnen og blander seg godt med bufferløsningen i glasset.

Ikke under noen omstendigheter skal den blå korken benyttes under prøvetaking. Denne skal være lukket.

Merk prøverøret med egen klistreetikett som inneholder **navn, fødselsnummer og dato** for prøvetaking. Påse at etiketten **IKKE** dekker innsyn til prøvepinnen. Sett deretter røret i sendehylsen. **Umerkede eller ufullstendig merkede prøver vil ikke bli analysert.**

Lever prøven og evt. rekvisisjon til ditt legekontor/fastlege, til laboratoriet direkte eller via post (husk transporthylse til røret). Prøverøret med avføring er holdbart i 7 dager ved romtemperatur, alternativt 15 dager i kjøleskap.